




Nordic massagepistol

Brugsanvisning

## Indledning

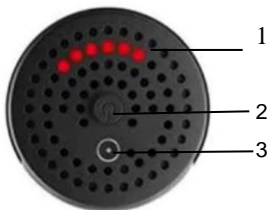

1. Niveauindikatorlampe
2. Knapkontrol; tænd/sluk og hastighedskontakt
3. Opladningsport

### Massagepistolen har 6 hastighedsniveauer

Niveau 1 – 2200 omdrejninger i minuttet

Niveau 2 – 2400 omdrejninger i minuttet

Niveau 3 – 2600 omdrejninger i minuttet

Niveau 4 – 2800 omdrejninger i minuttet

Niveau 5 – 3000 omdrejninger i minuttet

Niveau 6 – 3200 omdrejninger i minuttet

Massagepistolen har fire aftagelige massagehoveder:

Med slukket massagepistol indsætter du det ønskede massagehoved helt ved at trykke det indad. Du tager det af ved at trække udad.



U-hoved – til nakke og ryg



Patronformet hoved – til de dybe triggerpunkter



Kuglehoved – til store muskelgrupper



Lille fladt hoved – til blød massage

**Fare:** For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand og personskade skal dette produkt anvendes i overensstemmelse med nedenstående brugsanvisning.

## Opladning

- Lad apparatet lade fuldt op i tre timer, før det bruges første gang.
- Når du oplader, skal du slutte DC-enden på den medfølgende adapter til batteriets opladningsport og derefter sætte kablets AC-ende i stikkontakten.
- Under opladning ses et rødt lys på adapteren. Når det bliver grønt, er batteriet fuldt opladet.
- Batteriet kan oplades når som helst og på ethvert niveau.
- Brug ikke maskinen under opladning.
- Enhedens gennemsnitlige driftstid er 50-60 minutter afhængigt af hastigheden og det anvendte tryk under brugen.

## Brug

- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at aktivere strømmen.
- Når der er tændt for strømmen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at øge hastighedsniveauet. Niveauindikatorlamperne viser aktuel hastighed (1-6).
- Tryk igen, indtil du når det ønskede hastighedsniveau, og start massagen.
- Den anbefalede brugstid er ikke mere end en halv time ad gangen.

- Når du trækker vibrationshovedet ud, skal du kun anvende den kraft, der er nødvendig for at trække det ud.
- Brug kun apparatet på tørre, rene hudoverflader på kroppen. Brug den ikke gennem tøj.
- Tryk og flyt det forsigtigt rundt på huden.
- Brug kun dette apparat på kroppens bløde væv uden at forårsage smerte eller ubehag. Brug det ikke på hovedet eller på kroppens hårde dele eller knogledele.  
Brug kun det massagehoved, der giver de bedste resultater.
- Blå mærker kan være opstå under moderat tryk eller normalt tryk.
- Tjek altid det område, der behandles med fysioterapi.
- Stop straks med at bruge apparatet, hvis der er tegn på smerte eller ubehag.
- Hold fingre, hår eller andre dele af kroppen væk fra akslen og bagsiden af det vibrerende hoved, da de kan blive trukket ind i de bevægelige dele.
- Der må ikke placeres genstande i apparatets udluftningsåbning.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og vand må ikke komme ind i enhedens udluftningsåbning.
- Apparatet må ikke tabes eller bruges forkert.
- Kontrollér apparat og batteri omhyggeligt før hver brug. Apparatet må ikke ændres eller modificeres på nogen måde.
- Skruerne må ikke fjernes, og apparatet må ikke skilles ad.
- Brug eller oplad aldrig apparatet uden opsyn.
- Brug det ikke kontinuerligt i mere end en time. Stop enheden i 30 minutter, og brug den derefter igen.
- Undgå følsomme områder som hoved, ansigt og halshvirvler.

- Stop med at bruge apparatet, hvis der er betændelse, hævelse eller øget smerte.
- Hvis du kommer til skade, må du ikke bruge dette apparat. Kontakt din læge, før du bruger apparatet.

### Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring:

- Rengør kun apparatet med en tør eller fugtig, blød og ren klud. Brug ikke slibemidler og skuresvampe eller rengøringsmidler som alkohol, acetone osv., da dette kan beskadige apparatets overflade.
- Tør det af med en blød klud, når det skal opbevares, eller læg det i den medfølgende karton, når du rejser

## Sikkerhedsanvisninger

- Før du slutter dette produkt til strømforsyningen, skal du kontrollere, om den spænding, der er markeret på strømadapteren, svarer til den lokale forsyningsspænding.
- Adapteren indeholder en transformer. Skær ikke adapteren af for at udskifte den med et andet stik, da dette forårsager en farlig situation.
- Brug kun den medfølgende adapter.
- Hvis netledningen eller adapteren beskadiges, skal de altid udskiftes med den oprindelige type for at undgå fare.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller skylles under hanen, og det må ikke bruges i fugtige omgivelser (f.eks.: badeværelse, swimmingpool....)
- Placer ikke noget tæt på apparatet, der kan få vand eller anden væske til at dryppe eller sprøjte på apparatet.
- Hold det væk fra væsker og varmekilder.
- Hold udluftningen fri for støv og rester.
- Dette apparat er kun til indendørs brug.
- Dette apparat er kun til voksne.
- Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Ledninger udgør en potentiel kvælningssfare. Hold ledningen uden for børns rækkevidde (op til 3 år).
- Dette produkt er ikke legetøj. Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.

## Specifikationer

Varenummer: 912710/912773/LKKT-2021

Fremstillet i Kina

### Massagepistol

Produktets nettovægt: 910 g

Materialer: ABS

Produktstørrelse: 170 x 65 x 220 mm

IP-klassifikation: IP20

Massageeffekt: 24 W

Støj (DB): 40 DB

### Batteri:

Nominel spænding: 7,4 V

Type: Li-ion

Batterikapacitet: 1500 mAh

Arbejdstid 50-60 minutter/standbytid: 70-80 minutter

### Oplader

Vekselstrømsoplader, indgang: 110-220 V ~50/60 Hz

Vekselstrømsoplader, udgang: 8.4V1A



Apparater med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Aflever i stedet apparatet til en genbrugsstation, eller kontakt kommunen.





