




Nordic Massage Gun

Bruksanvisning

Inledning

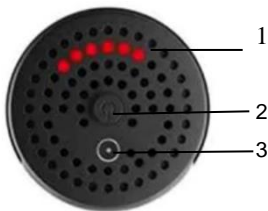

1. Nivåindikatorlampa
2. Knapp: ON/OFF och hastighetskontroll
3. Laddningsport

Massagepistolen har 6 hastighetsnivåer

Nivå 1 – 2 200 rpm

Nivå 2 – 2 400 rpm

Nivå 3 – 2 600 rpm

Nivå 4 – 2 800 rpm

Nivå 5 – 3 000 rpm

Nivå 6 – 3 200 rpm

Massagepistolen har fyra utbytbara massagehuvuden:

Tryck fast önskat massagehuvud genom att trycka det inåt när massagepistolen är avstängd. Ta bort det genom att dra det utåt.



U-huvud – till nacke och rygg



Patronhuvud – till de djupa tryckpunkterna



Bollhuvud – för stora muskelgrupper



Litet platt huvud – till mjuk massage

Observera: För att minska risken för elektriska stötar, brand och personskada ska den här produkten användas i enlighet med följande instruktioner.

Laddning

- Ladda apparaten i tre timmar innan den används för första gången.
- För att ladda ska DC-kontakten på den medföljande adaptern anslutas till laddningsporten på batteriet och AC-änden till nätuttaget.
- Under laddning lyser en röd lampa på adaptern. När den slår om till grönt är batteriet fulladdat.
- Batteriet kan laddas när som helst och på vilken nivå som helst.
- Använd inte apparaten när den laddas.
- Apparatus genomsnittliga drifttid är 50–60 minuter beroende på hastigheten och hur mycket tryck som tillämpas.

Användning

- Tryck på strömknappen för att aktivera strömmen.
- När strömmen är på kan strömknappen användas för att öka hastigheten. Nivåindikatorlamporna visar aktuell hastighet (1–6).
- Tryck igen tills du uppnått önskad hastighetsnivå och påbörja massagen.
- Rekommenderad användningstid är högst en halvtimme åt gången.
- För att lossa på vibrationshuvudet är det bara att dra det utåt.

- Använd endast apparaten på torr och ren hud. Använd den inte genom kläder.
- Tryck och förflytta varsamt över huden.
- Använd endast apparaten på mjuk vävnad på kroppen, utan att orsaka smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet eller annan hård del eller skelettdel.
Använd endast det massagehuvud som ger bäst resultat.
- Blåmärken kan uppstå under medelhårt till normalt tryck.
- Kontrollera alltid området som behandlas.
- Sluta omedelbart använda apparaten vid minsta tecken på smärta eller obehag.
- Se till att fingrar, hår och andra kroppsdelar inte kommer i kontakt med kolven eller baksidan av vibrationshuvudet, eftersom de kan nypas fast.
- Placera inga föremål för apparatens ventil.
- Nedsänk inte apparaten i vatten och låt inte vatten tränga in i apparatens ventil.
- Tappa inte apparaten och använd den inte på fel sätt.
- Kontrollera apparaten och batteriet noggrant före varje användning. Ändra och modifiera inte apparaten på något sätt.
- Avlägsna inte skruvar och försök inte att demontera apparaten.
- Använd och ladda aldrig apparaten obehävar.
- Använd den inte kontinuerligt i mer än en timme. Stäng av apparaten i 30 minuter och använd den sedan igen.
- Undvik känsliga områden som huvud, ansikte och halskotor.
- Sluta använda apparaten vid inflammation, svullnad eller ökad smärta.
- Använd inte apparaten om du har skador. Rådgör med läkare innan du använder den här apparaten.

Underhåll, rengöring och förvaring:

- Rengör endast apparaten med en torr eller fuktig mjuk trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel och hjälpmedel, eller rengöringsmedel som alkohol, aceton etc., eftersom detta kan skada apparatens yta.
- Torka den ren med en mjuk trasa före förvaring eller lägg den i den medföljande lådan när du reser.

Säkerhetsinstruktioner

- Innan du ansluter produkten till strömförsörjningen, kontrollera att spänningen som anges på strömadaptern överensstämmer med den lokala nätspänningen.
- Adaptern innehåller en transformator. Kapa inte adaptersnäs sladd för att byta kontakten, detta kan orsaka livsfara.
- Använd endast den medföljande adaptern.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av servicetekniker eller behörig person för att undvika fara.
- Sänk inte ner apparaten i vatten och skölj den inte under kranen. Använd den inte i fuktig miljö (till exempel badrum, vid en simbassäng, etc.).
- Placera inte något i närheten av apparaten som kan leda till att vatten eller annan vätska droppar eller stänker på apparaten.
- Håll den borta från vätskor och värmekällor.
- Håll ventilen fri från damm och skräp.

- Apparatens ska endast användas inomhus.
- Apparatens är endast till för vuxna.
- Apparatens är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida det inte sker under uppsikt och handledning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Sladdar utgör en potentiell strykningsrisk. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 3 års ålder.
- Den här produkten är ingen leksak. Barn får inte leka med apparaten.
- Apparatens är endast avsedd för hushållsbruk.

Specifikationer

Artikelnummer: 912710/912773/LKKT-2021

Tillverkad i Kina

Massagepistol

Produktens nettovikt: 910 g

Material: ABS

Produktens storlek: 170 x 65 x 220 mm

IP-klass: IP20

Massagekraft: 24 W

Ljudnivå (dB): 40 dB

Batteri:

Märkspänning: 7,4 V

Typ: Litiumjon

Batterikapacitet: 1 500 mAh

Drifttid 50–60 minuter / Standby-tid: 70–80 minuter

Laddare

AC-laddarens ineffekt: 110–220 V–50/60 Hz

AC-laddarens uteffekt: 8,4 V 1 A



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas bland hushållsavfall.
Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen.



