

WiFi Digitalt Mikroskop – Bruksanvisning


Viktig information

- a. Se till att mikroskopet är anslutet till en strömkälla innan du använder det.
- b. Ta av linsskyddet före användning och sätt tillbaka det efteråt.

Beskrivning

Det här är ett bärbart, digitalt mikroskop med wi-fi hotspot som kan anslutas till iOS- och Androidenheter. Mikroskopet kan även anslutas till en dator via USB. Ju större skärm, desto bättre visnings- och bildkvalitet. Har stöd för kamera, video och fillagring.

Funktionsbeskrivning

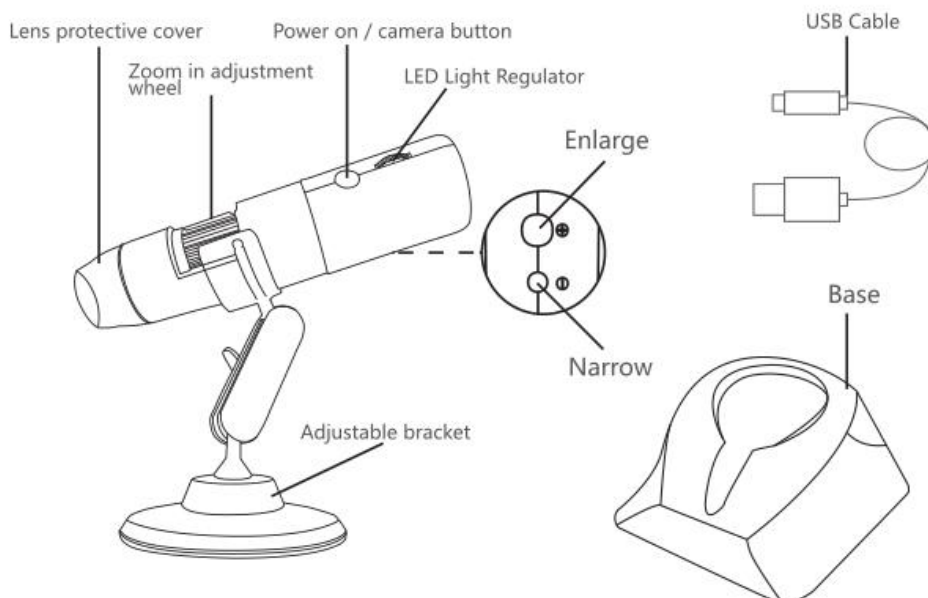

Användningsinstruktioner för mobiltelefoner

1. Ladda ner och installera appen

A. iOS:

Sök efter "Max-see" i App Store och ladda ner och installera appen.

B. Android (internationellt):

Sök efter "Max-see" i Google Play och ladda ner och installera appen.

2. Starta enheten

Tryck och håll inne kameraknappen. En blå lampa blinkar (anslutning till wi-fi lyckades, den blå lampan lyser alltid).

3. Anslut till wi-fi

Öppna Max-see och klicka på OK för att komma till sidan för att ansluta till wi-fi. Anslut iOS-/Android-enheten till Max-see_xxxx wi-fi hotspot (inget lösenord krävs). Återgå till Max-see efter att anslutningen har upprättats.

4. Justera fokushjulet och LED-lamporna

Vrid hjulet när du tar bilder eller filmer för att justera fokus och justera ljusstyrkan på LED-lamporna för optimal observation.



Upplösning: Klicka för att ändra upplösning.

Rotera 180°: Klicka för att rotera objektet 180°.

Video: Tryck för att spela in/avsluta inspelning.

Sparade filer: Klicka för att visa eller radera foton eller videoklipp.

Foton: Klicka för att ta en bild.

Användningsinstruktioner för Windows

1. Ladda ner programvaran

Ladda ner programvaran från: www.inskam.com/download/camera.zip

2. Starta enheten


Tryck och håll inne kameraknappen. Den blå indikatorlampan blinkar.

3. Anslut till datorn

a. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och kör programmet "Smart Camera".


b. Klicka på inställningsfliken på huvudskärmen.

c. Klicka på enheten och välj GENERAL-UVC

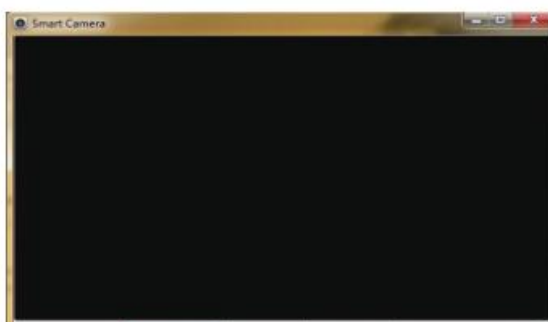

Användningsinstruktioner för Mac

1. Starta enheten och anslut den till datorn med hjälp av USB-kabeln.
2. Öppna programmet Photobooth.
3. Klicka på kameran och välj GENERAL-UVC#2 (standard).

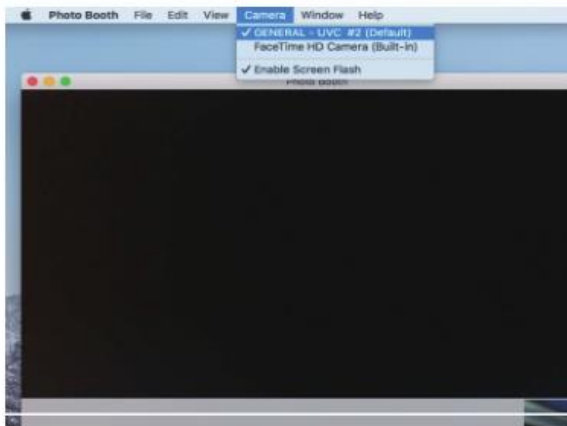

***Observera:**

Vid användning via dator:

1. Högsta upplösning: 720P.
2. Knapparna för att zooma in och ut kan inte användas, det finns endast fast brännvidd.

Laddning och display

1. Laddning

a. Använd laddningskabeln för att ansluta enheten till en strömkälla när batterinivån är låg. Det rekommenderas inte att använda enheten medan den laddas (batteriets livslängd kan reduceras).

b. Ladda inte enheten via datorn. Den kommer automatiskt att gå in i PC-kameraläge.

2. Batteri


Enhetens batteri är ett 780 mA litium-polymer-batteri. När batteriet är fulladdat kan enheten användas kontinuerligt i ca 3 timmar. Det tar ca 3 timmar att ladda batteriet.

3. Indikatorlampa

a. Lampan lyser rött när batteriet laddas. Lampan slocknar när batteriet är fulladdat.

b. Den blå lampan blinkar när enheten har startats. Lampan lyser när enheten är ansluten till wi-fi.

c. När batterinivån är låg blinkar den röda lampan långsamt i 10 sekunder och släcks sedan.

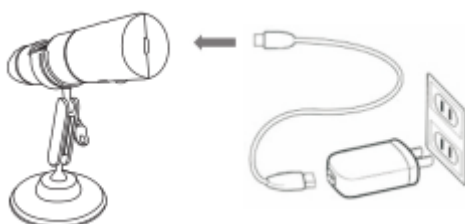

Produktinformation

| | |
|--------------------|---|
| Pixlar | 2.0 megapixlar |
| Förstoring | x 50–1 000 |
| Videoupplösning | 1920*1080P/1280*720P/640*480P |
| Avbildningsavstånd | Justeras manuellt (3~60 mm) |
| Wi-fi-anslutning | 10 m (öppen miljö) |
| Bildformat | JPG |
| USB-typ | USB 2.0 |
| Strömförsörjning | USB (5 V DC) |
| Videoformat | MP4/AVI |
| Bildhastighet | 15 f/s vid ljusstyrka 600 LUX |
| Operativsystem | Android 4.3, IOS 8.0, Windows Vista/7/8/10, MacOS X 10.8 eller senare |
| Lista över delar: | Mikroskop Bruksanvisning |

| | |
|--|---|
| | 1 m USB-kabel Basplatta av plats Stativ av metall Förpackningslåda |
|--|---|

Felsökning

Om enheten inte fungerar korrekt, läs följande avsnitt noggrant och felsök problemen eller kontakta oss för support.

Ingen bild

1. Kontrollera wi-fi-inställningarna på telefonen och se till att enheten är ansluten.
2. Starta om appen.
3. Starta om enheten.
4. Kontrollera att telefonen tillåter Max-see att ansluta till trådlöst nätverk.
5. Stäng av nätverket.

LED-lamporna lyser för svagt

Vrid hjulet nedåt för att öka ljusstyrkan

Enheten kraschar

Tryck på strömknappen och förstoringsknappen samtidigt och håll inne i

5 sekunder för att starta om enheten

iOS

Gå till inställningar, gå till Max-see längst ner bland apparna för att tillåta fotografering.